



ADAPTOR® AIR SPRING® Surface Cushion

Translations: English; Español; Français; Deutsch; Italiano;
Nederlands; Dansk; Svenska; Norsk; Português; Ελληνικά; Suomi

The ADAPTOR Surface Cushion by The ROHO Group is an ideal solution for those who need protection from tissue trauma in areas such as elbows, wrists, heels, neck, chest or other places where human tissue comes in contact with a support surface. The AIR SPRING cell design of the ADAPTOR cushion absorbs shock and impact and protects the user from shear and friction. Each cell is independently sealed to allow the cushion to be cut for attachment to various surface shapes, such as wheelchair arms and insides, front trays, footrests, headrests, helmet interiors, and other "hot spots" where non-controlled movement by a patient may require padding. For attachment, ROHO suggests using hook and loop fastener strips.

To use, the ADAPTOR Cushion should be cut with scissors to the shape of the support surface to which it will be applied. Air pockets that are cut will not provide cushioning, so an attempt should be made to cut between the cells, along the flat area of the cushion.

Size: 10" x 14" / 26 cm x 36 cm (70 cell) sections.
Each cell is approximately 0.75 in. sq. x 1" tall / 2 cm sq. x 3.5 cm tall.
Weight: Approximately 0.75 lbs. / 1.3 kg

Cleaning and Disinfection Instructions

To clean, use a soft plastic bristle brush, sponge or washcloth to gently scrub air cells and spaces between. ROHO suggests using a liquid dishwashing or laundry detergent or other general-purpose cleaning product. For institutional cleaning, a general house-keeping disinfectant cleaner may be used. Rinse thoroughly, then towel or hang dry.

To disinfect, use a germicidal product that meets infection control needs. ROHO suggests a disinfectant with tuberculocidal properties.


For home disinfection, solutions of 0.5 cup liquid household bleach per quart of water (125 ml bleach to 1 liter water). Keep the clean cushion wet with bleach solution for 10 minutes. Rinse thoroughly and dry. NOTE: UNLESS THERE IS AN INFECTION OR OPEN WOUND, ONLY PERIODIC CLEANING IS NECESSARY.

For institutional disinfection, most germicidal disinfectants are safe if used following the manufacturer's dilution directions.

CAUTION: DO NOT USE OIL-BASED LOTIONS OR LANOLIN CONTAINING PRODUCTS ON THE CUSHION OR ON BODY PARTS IN CONTACT WITH THE CUSHION, AS THESE PRODUCTS MAY CAUSE DETERIORATION OF THE RUBBER. ROHO DOES NOT RECOMMEND STERILIZATION METHODS USING TEMPERATURES GREATER THAN 200 °F / 93 °C.

Warning: The ADAPTOR Surface Cushion is not recommended as a sole supporting medium under the buttocks.

Manufactured by:
The ROHO Group, Inc.
100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429
toll-free 800-851-3449, phone 618-277-9173
fax 618-277-6518

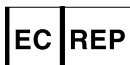

(MDSS)
Burckhardtstrasse 1
D - 30163 Hannover, Germany



The ROHO Group, Inc. has a policy of continuous product improvement and reserves the right to amend specifications presented in this brochure.

The following are registered trademarks of ROHO, Inc.: ROHO®, ADAPTOR®, and AIR SPRING®.
© 2005 The ROHO Group Inc.

ADAPTOR, AIR SPRING, -pintapehmike

ROHO Inc:in valmistama ADAPTOR-pintapehmike on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat suojausta hankaamiin, esim. kyynärpäää, rannca, kantapäää, kaula, rinta tms, ADAPTOR-pehmikkeen AIR SPRING -kennomalli vaimentaa iskut ja suojelee käyttäjää hierrolta ja hankaukselta. Kukin kenno on toisistaan riippumatta ilmatiivis ja mahdollistaa näin pehmikkeen leikkaamisen erilaisia pinnanmuotoja varten, kuten pyöratuolin käsinsojiin ja sen sisäosiin, etutelineisiin, jalkaluotiin, päänsöjiin, kypärien sisäpintoihin, ja muihin tarpeellisiin paikkoihin, joissa potilaan kontrolloimaton liikkuminen saattaa vaatia pehmytyksiä. Kiinnitystä varten ROHO suosittelee käytettäväksi tarranauhoja.

ADAPTOR-pehmike täytyy muotoilla saksilla sopivaksi siihen tukipintaan, johon sitä käytetään. Leikkaus olisi pyrittävä tekemään kennojen välistä pehmikkeen litteää osaa myöten. Jos ilmataskuja leikataan, pehmikkeen pehennysominaisuus menetetään.

Koko: 26 cm x 36 cm (70 kennoa).

Kukin kenno on noin 2 cm x 2 cm x 3.5 cm (korkeus).

Paino: Noin 1.3 kg

Puhdistus- ja desinfiointiohjeet

Puhdistaksesi harjaa varovasti ilmakennot ja niiden välit pehmeällä harjalla, pesusienellä tai pesurievulla. ROHO suosittelee käytettäväksi astianpesu- tai pyykinpesuainetta tai muuta yleispuhdistukseen tarkoitettua pesuainetta. Laitoksissa voidaan käyttää yleispuhdistukseen tarkoitettua desinfioivaa puhdistusainetta. Huuhtelee huolellisesti, sitten kuivaa pyyhkeellä tai ripusta kuivumaan.

Käytä desinfioidessa mikro-organismeja tappavaa tuotetta, täyttää tartunnan ehkäisyllä asetetut vaatimukset. ROHO suosittelee desinfiointia tuberkuloosin ehkäisyn mahdollistavilla tuotteilla.

Kotidesinfioinnissa sekoita 125 ml valkaisuainetta yhteen litraan vettä. Anna valkaisuaineseoksen vaikuttaa puhtaaseen pehmikkeeseen 10 minuuttia. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa. HUOMAA: ELLEI KYSEESSÄ OLE TULEHDUS TAI AVOIN HAAVA, VAIN AJOITAINEN PUHDISTAMINEN ON TARPEEN.

Desinfioitaessa laitoksissa useimmat mikro-organismeja tappavat tuotteet ovat turvallisia, mikäli valmistajan laimennusohjeita noudatetaan.

VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ PEHMİKKEEN PINNOISSA TAI NIITÄ KOSKETTAVISSA KEHON OSISSA ÖLJYPOHJAJAISIA NESTEITÄ TAI TUOTTEITA, JOTKA SISÄLTÄVÄT LANOLIINIA, KOSKA NÄMÄ SAATTAVAT AIHEUTTAA KUM-PINNAN RAPPEUTUMISTA. ROHO EI SUOSITTELE STERILIOINTIMENETTELYJÄ, JOISSA KÄYTETÄÄN 93 ASTEEN YLITTÄVIÄ LÄMPÖTILOJA.

Varoitus: ADAPTOR-pintapehmikettä ei suositella yksinomaiseksi instiinalustaksi.